

H2401

Maia Gal

Galvanic / Corriente galvánica / Courant galvanique
Corrente galvanica / Galvanischer Strom



EN	2
ES	5
FR	9
IT	13
DE	17

DDUUEETT EUROPE would like to thank you for choosing Sonia products. We hope that this instruction manual will help you get the most out of this product.

If you have any doubts regarding its use and/or operation, please contact your distributor.

BEFORE USE

- Please read the entire instruction manual carefully before using the product. Take note of any warnings included in this manual.
- Always keep this instruction manual handy and if you give the device to another person, hand over the manual as it is an essential part of the product.
- Some components of the product may differ from the image that appears in catalogues, websites, brochures, etc.
- In order to enhance the product, the manufacturer reserves the right to modify its features and/or components without prior notice.

CORRECT USE OF THE DEVICE

- This product has been designed to be used by beauty professionals at beauty salons and should not be used for other purposes.
- Please note that any misuse of the device entails the loss of the guarantee.
- Do not make any modification to the device without the authorisation of DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL shall not be held liable for any material or personal damage due to the misuse of the product.

CONTRAINDICATIONS

- This product should not be used on:
 - People with metal implants in their body.
 - People with pacemakers or heart problems.
 - Pregnant women.
 - People with sensitive skin, lesions, inflammations, or any skin problem or disease.
- With people undergoing medical treatment or a diagnostic process, the product must be used with medical authorisation.

PRECAUTIONS

- Before using it for the first time and after each use, check the device and the mains cable for any damage.
- Unplug the device from the mains before starting to clean it or undertaking any type of maintenance.
- Do not use the product outdoors or in places

where it may be affected by humidity or inclement weather.

- If the power supply cable is defective, unplug the appliance immediately and inform your dealer or specialised technician.
- Position the power supply cable properly so that people cannot trip over it and make sure you plug it into an earthed socket.
- At the end of the working day, disconnect the device and unplug the power supply cable from the mains.
- If you detect any anomaly in the operation of the product, please contact your distributor or specialised technician.

SAFETY INDICATIONS

- The device and accessories should be kept out of the reach of children.
- Only plug the device into a properly installed socket. The local mains voltage must correspond to the technical specifications of the device.
- The power socket must be accessible in case you have to quickly unplug the device at any given time.
- Always pull out the actual plug and not the mains cable.
- Never tamper with any electrical component or open up/repair any component of the device.
- Only your distributor or specialised technician should repair the device.
- Do not switch on the device if there is visible damage to it or to the mains cable.
- Never touch the device or the mains cable with wet hands.


CONTENTS

- Main body x 1 unit
- Power cable x 1 unit
- Handpiece with double stick probe x 1 unit
- Handpiece with roller probe x 1 unit
- Instruction manual x 1 unit

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Product	Galvanic
Reference	H2401
Voltage	85-265 V
Input frequency	50/60 Hz
Power	20 W
Dimensions	28 x 17 x 11 cm
Net weight	1,95 Kg

COMPONENT IDENTIFICATION

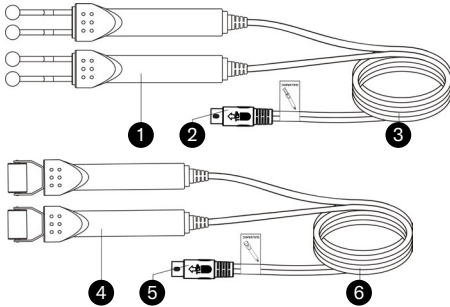

- 1 Handpiece with double stick probe
 - 2 Double stick probe cable connector
 - 3 Double stick probe flexible cable
 - 4 Handpiece with roller probe
 - 5 Roller probe handpiece cable connector
 - 6 Roller probe flexible cable
- Double stick probe: to treat small or irregular areas of the skin
 - Roller probe: to treat large and regular areas of the skin


CONTROL PANEL

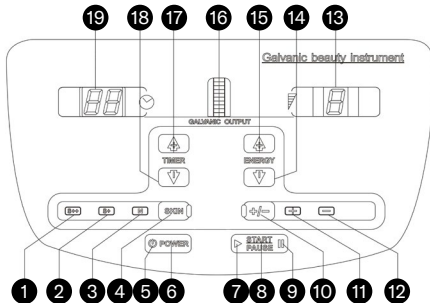

- 1 Very sensitive skin indicator.
- 2 Sensitive skin indicator
- 3 Normal skin indicator
- 4 Skin type selection
- 5 Power on indicator
- 6 On / off button
- 7 Run indicator
- 8 Start / Stop button
- 9 Pause indicator

- 10 Ion conduction selection button
- 11 Cation conduction indicator (positive charge)
- 12 Anion conduction indicator (negative charge)
- 13 Power display
- 14 Decrease power button
- 15 Increase power button
- 16 Galvanic current conduction indicator
- 17 Increase time button
- 18 Decrease time button
- 19 Timer


REAR PANEL

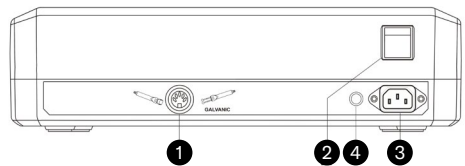

- 1 Probe handpiece cable connection
- 2 Power supply switch
- 3 Electrical power supply connector
- 4 Fuse

CONNECTION INSTRUCTIONS

- Connect the power cable to the rear panel of the main body.
- Connect the cable of the handpiece to the corresponding output on the rear panel.
- It is only possible to connect one of the two handpieces at the same time, so you must select the one you need according to the treatment to be performed.

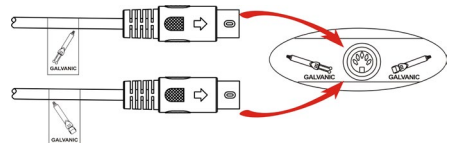

POWER AND CONFIGURATION

- Turn on the power switch on the rear of the machine and press **POWER** on the control panel. The power indicator will light up. The machine will be in standby mode and ready for operation. On the control panel:
 - The timer will show 15 minutes.

- The power indicator will show 1.
- The normal skin indicator  will light up.
- The cation conduction (positive charge) indicator  will light up.
- On the  button, the pause indicator  will light up.
- Set the timer using the  or  buttons to choose the operating time of the machine, in a range of between 1 and 30 minutes.
- Set the power using the  or  buttons to choose the power of the machine, in a range of between 1 and 9.
- Skin type selection: use the  button to select the type of skin to be treated.
 - When the indicator  lights up, the selected skin type is normal.
 - When the  indicator lights up, the selected skin type is sensitive.
 - When the  indicator lights up, the selected skin type is very sensitive.
- Ion conduction selection: press  to select the polarisation of the probe with a red cable. The probe with a black cable will always have the polarity inverse to the one selected for the red cable.
 - One feature of this device is that the patient should not hold any electrodes to close the circuit, as one of the probes acts as positive and the other probe acts as negative, thus closing the circuit.
 - When the  indicator lights up, it indicates cation conduction (positive charge).
 - When the  indicator lights up, it indicates anion conduction (negative charge).
- Use the  button to start or stop the device.
 - When running, the  indicator will light up.
 - When paused or on standby, the  indicator will light up.

OPERATION

This device can be used with the roller probe handpieces for large or regular areas of the skin, or with the double stick probes for small or irregular areas of the skin.

- Connect the device and leave it in standby mode with the  indicator lit.
- Apply conductive gel or cream after cleaning the skin to be treated.
- Select the type of skin to be treated, the operating time and set the power to minimum.
- In order to correctly select the polarisation of the ion conduction with the  button, the pH value of the previously applied product should be considered, selecting one or the other polarity depending on whether it is an alkaline or an acidic

product.

- Press  and the run indicator  will light up.
- Take the two probes (or the roller or double stick ones) without letting them touch.
- Start to move them slowly and gradually set the power until you reach the level necessary for the treatment, always maintaining a slight stinging sensation.

When applying this treatment on the face, it is advisable to alternate the two probes (positive and negative) on both sides of the face in order to make equal effects on both sides of the face

Bear in mind:

- When the polarity is set for positive electrodes, there will be a stinging sensation given off by the roller probe that is stronger than the one given off by the negative electrode. Select it according to your needs.
- The selection of ion conduction to be used should coincide with the pH of the product applied.
 - When the probe with a red cable acts as a positive charge, the conductive solution should be acidic (+).
 - When the probe with a red cable acts as a negative charge, the conductive solution should be alkaline (-).
 - If the pH is not indicated in the solution to be used, use a pH indicator strip to determine it.
- If the run indicator  is flashing, the circuit is not closed and there is no ion conduction.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning the device, unplug it from the mains.
- Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use liquids to clean it.
- After each use, the various components and accessories must be sterilised and left to dry.
- For maintenance or repairs of any part of the product, please contact your distributor or specialised technician.

RECYCLING

If you need to dispose of the product or any of its parts or accessories, please check and respect the laws and regulations applicable to waste management and environmental protection.

Desde DDUUEETT EUROPE SL le agradecemos su confianza por comprar productos Sonia. Esperamos que este manual de instrucciones le sea de ayuda para sacar el máximo provecho de este producto.

En caso de duda respecto de su utilización y/o funcionamiento, póngase en contacto con su distribuidor.

ANTES DE NADA

- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Tenga en cuenta las advertencias que constan en este manual.
- Conserve siempre este manual de instrucciones y si transfiere el aparato, entregue el manual con él ya que constituye una parte esencial del producto.
- Algunos componentes del producto pueden diferir de la imagen que aparece en catálogos, web, folletos comerciales, etc.
- Con la finalidad de efectuar mejoras del producto, el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y/o componentes de este sin previo aviso.

USO CORRECTO DEL APARATO

- Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por profesionales del sector estético en centros de belleza y no debe ser usado para otros fines.
- Tenga en cuenta que cualquier uso indebido del aparato conlleva la pérdida de la garantía.
- No realice ninguna modificación en el aparato sin la autorización de DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL no se hará responsable de ningún daño material o personal debido al mal uso del producto.

CONTRAINDICACIONES

- No debe utilizarse este producto en:
 - Personas con implantes metálicos en el cuerpo.
 - Personas con marcapasos o problemas cardíacos.
 - Mujeres embarazadas.
 - Personas con piel sensible, lesiones, inflamaciones, o cualquier problema o enfermedad en la piel.
- En caso de personas bajo tratamiento médico o proceso de diagnóstico es necesario utilizar el producto bajo autorización médica.

PRECAUCIONES

- Antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso, compruebe si hay daños en el aparato y en el cable de red.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica

antes de iniciar su limpieza o cualquier tipo de mantenimiento.

- No use el producto al aire libre ni en ningún lugar donde pueda verse afectado por la humedad o las inclemencias meteorológicas.
- Si el cable de alimentación eléctrica presenta cualquier defecto, desconecte el aparato inmediatamente e informe a su distribuidor o técnico especializado.
- Coloque el cable de alimentación debidamente de manera que no se pueda tropezar con él y conéctelo a un enchufe con toma a tierra.
- Diariamente, después de finalizar la jornada, desconecte el aparato y desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Si detecta cualquier anomalía en el funcionamiento del producto, consulte con su distribuidor o técnico especializado.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- El aparato y los accesorios deben mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Conecte el aparato exclusivamente a una toma de corriente debidamente instalada. La tensión de red local debe corresponderse con los datos técnicos del aparato.
- La toma de corriente debe estar accesible por si se tiene que desenchufar rápidamente el aparato en un momento dado.
- Tire siempre de la clavija y no del cable de red.
- No manipule nunca ningún componente eléctrico ni abra o repare ningún componente del aparato.
- Únicamente su distribuidor o técnico especializado deben reparar el aparato.
- No ponga en marcha el aparato si este o el cable de red presentan daños visibles.
- Nunca toque el aparato o el cable de red con las manos mojadas.


CONTENIDO DE LA CAJA

- Cuerpo principal x 1 unidad
- Cable de alimentación eléctrica x 1 unidad
- Manipulo con sonda de doble "stick" x 1 unidad
- Manipulo con sonda de rodillo x 1 unidad
- Manual de instrucciones x 1 unidad

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Producto	Corriente Galvánica
Referencia	H2401
Tensión	85-265 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Potencia	20 W
Dimensiones	28 x 17 x 11 cm
Peso neto	1,95 Kg

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES

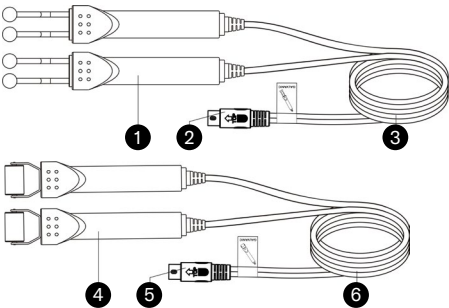


- 1 Manípulo con sonda de doble “stick”
- 2 Conector cable manípulo sonda de “doble stick”
- 3 Cable flexible sonda de “doble stick”
- 4 Manípulo con sonda de rodillo
- 5 Conector cable manípulo sonda de rodillo
- 6 Cable flexible sonda de rodillo
- Sonda de “doble stick”: para tratar en áreas pequeñas o irregulares de la piel
- Sonda de rodillo: para tratar en áreas grandes y regulares de la piel

PANEL DE CONTROL

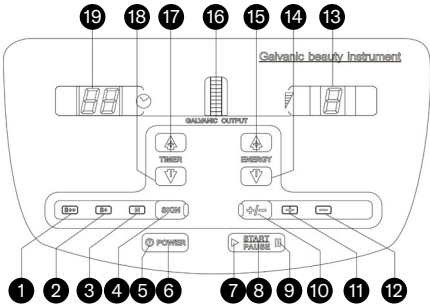

- 1 Indicador piel muy sensible.
- 2 Indicador piel sensible
- 3 Indicador piel normal
- 4 Selección del tipo de piel
- 5 Indicador encendido
- 6 Pulsador encendido / apagado
- 7 Indicador de marcha
- 8 Pulsador Marcha / Paro
- 9 Indicador de pausa
- 10 Pulsador selección conducción de iones
- 11 Indicador conducción de cationes (carga positiva)
- 12 Indicador conducción de aniones (carga negativa)
- 13 Visualización de potencia
- 14 Pulsador disminuir potencia
- 15 Pulsador aumentar potencia
- 16 Indicador conducción de corriente galvánica
- 17 Pulsador aumento de tiempo
- 18 Pulsador disminución de tiempo
- 19 Temporizador


PANEL POSTERIOR

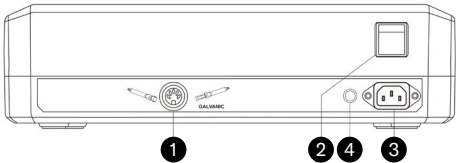

- 1 Conexión cable manípulo sonda
- 2 Interruptor alimentación eléctrica
- 3 Conector alimentación eléctrica
- 4 Fusible

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN

- Conecte el cable de alimentación eléctrica en el panel posterior del cuerpo principal
- Conecte el cable del manípulo a la salida correspondiente del panel posterior.
- Solo es posible conectar uno de los 2 manípulos al mismo tiempo, por lo que debe seleccionar el que necesite según el tratamiento a realizar.

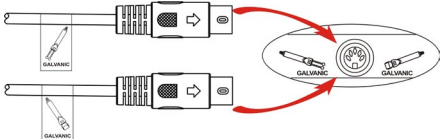

ENCENDIDO Y CONFIGURACIÓN

- Active el interruptor de alimentación eléctrica situado en la parte posterior de la máquina y pulse  en el panel de control. El indicador de encendido  se iluminará. La máquina estará en modo espera y lista para su funcionamiento. En el panel de control:
 - El temporizador mostrará 15 minutos.
 - El indicador de potencia mostrará 1.
 - El indicador de piel normal  se iluminará.
 - El indicador de conducción de cationes (carga positiva)  se iluminará.
 - En el pulsador , el indicador de pausa  se iluminará.
- Ajuste el temporizador usando los pulsadores  o  para definir el tiempo de funcionamiento de la máquina, en un rango entre 1 y 30 min.
- Ajuste la potencia usando los pulsadores  o  para definir la potencia de la máquina, en un rango de potencia entre 1 y 9.
- Selección del tipo de piel: use el botón  para seleccionar el tipo de piel a tratar.
 - Cuando el indicador  se ilumina, el tipo de piel seleccionada es "normal".
 - Cuando el indicador  se ilumina, el tipo de piel seleccionada es "sensible".
 - Cuando el indicador  se ilumina, el tipo de piel seleccionada es "muy sensible".
- Selección de conducción de iones: pulse  para seleccionar la polarización de la sonda con cable rojo. La sonda con cable negro siempre tendrá la polaridad inversa a la seleccionada para el cable rojo
 - Una característica de este aparato es que el paciente no debe sujetar ningún electrodo para cerrar el circuito, ya que una de las sondas actúa como positivo y la otra sonda actúa como negativo, cerrando así el círculo.
 - Cuando el indicador  se ilumina, indica conducción de cationes (carga positiva).
 - Cuando el indicador  se ilumina, indica conducción de aniones (carga negativa).
- Use el pulsador  para arrancar o parar el funcionamiento del aparato.
 - Cuando esté en funcionamiento, el indicador  se iluminará.
 - Cuando esté en pausa o en espera, el indicador  se iluminará.

FUNCIONAMIENTO

Este aparato se puede usar con los manípulos con sonda de rodillo para áreas grandes o zonas regulares de la piel o con los manípulos con sonda de doble "stick" para áreas pequeñas o zonas irregulares de la piel.

- Conecte el aparato y déjelo en modo espera con el indicador .
- Aplique gel conductor o crema previa limpieza de la piel a tratar.
- Seleccione el tipo de piel a tratar, tiempo de funcionamiento y ajuste la potencia al mínimo.
- Para seleccionar de forma correcta la polarización de la conducción de iones con el pulsador  se debe tener en cuenta el valor de pH del producto aplicado previamente, seleccionando una u otra polaridad en función de si es un producto base o ácido.
- Pulse  y el indicador de funcionamiento  se iluminará.
- Coja las 2 sondas (o las de rodillo o las de doble "stick") sin que se toquen entre ellas.
- Empezar a moverlas lentamente y ajuste la potencia hasta llegar al nivel necesario para el tratamiento de forma gradual, manteniendo siempre una ligera sensación de escozor.
- Al aplicar este tratamiento en la cara es conveniente ir alternado las 2 sondas (positiva y negativa) a un lado y otro de la cara, para igualar los efectos a ambos lados.

A tener en cuenta

- Cuando la polaridad esté configurada para electrodos positivos se tendrá una sensación de escozor de la sonda de rodillo más fuerte que para el electrodo negativo. Selecciónelo según sus necesidades.
- La selección de conducción de iones que se va a usar debe ser acorde con el pH del producto aplicado.
 - Cuando la sonda con cable rojo actúa como carga positiva, la solución conductora debe ser ácida (+).
 - Cuando la sonda con cable rojo actúa como carga negativa, la solución conductora debe ser base (-).
 - Si el pH no viene indicado en la solución a utilizar, use un papel indicador de pH para determinarlo.
 - Si el indicador de funcionamiento  parpadea, significa que el circuito no está cerrado y no existirá conducción de iones.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo de la red.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco. No utilice líquidos para limpiarlo.
- Después de cada uso, los diferentes componentes y accesorios deben esterilizarse y secarse.
- Para mantenimientos o reparación de alguna parte del producto, debe contactar con su distribuidor o técnico especializado.

RECICLAJE

Si necesita deshacerse del producto o de alguna de sus partes o accesorios, consulte y respete las leyes y normativa aplicable a la gestión de residuos y protección del medio ambiente.

De la part de DDUUEETT EUROPE SL, nous vous remercions de votre confiance dans l'achat des produits Sonia. Nous espérons que ce manuel d'instructions vous aidera à tirer le meilleur parti de ce produit.

En cas de doute sur son utilisation et / ou son fonctionnement, contactez votre distributeur.

AVANT TOUT

- Lisez attentivement tout le manuel d'instructions avant d'utiliser le produit. Observez les avertissements de ce manuel.
- Conservez toujours ce mode d'emploi et, si vous transférez l'appareil, remettez-le avec lui, car il constitue un élément essentiel du produit.
- Certains composants du produit peuvent différer de l'image apparaissant dans les catalogues, les sites Web, les brochures commerciales, etc.
- Afin d'apporter des améliorations au produit, le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et / ou les composants de celui-ci sans préavis.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

- Ce produit a été conçu pour être utilisé par des professionnels de la beauté dans des centres de beauté et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Veuillez noter que toute mauvaise utilisation de l'appareil entraîne la perte de la garantie.
- N'effectuez aucune modification sur l'appareil sans l'autorisation de DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL ne sera responsable d'aucun dommage matériel ou personnel dû à une mauvaise utilisation du produit.

CONTRE-INDICATIONS

- Ce produit ne doit pas être utilisé chez :
 - Les personnes ayant des implants métalliques dans le corps.
 - Les personnes portant des stimulateurs cardiaques ou ayant des problèmes cardiaques.
 - Les femmes enceintes.
 - Les personnes ayant une peau sensible, des lésions, des inflammations, ou tout autre problème ou maladie de peau.
- Dans le cas de personnes sous traitement médical ou processus de diagnostic, il est nécessaire d'utiliser le produit sous autorisation médicale

- Avant la première utilisation de l'appareil et après chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés.
- Débranchez l'appareil du secteur avant de commencer le nettoyage ou tout type d'entretien.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur ou dans un endroit où il pourrait être affecté par l'humidité ou les intempéries.
- Si le câble d'alimentation est défectueux, débranchez immédiatement l'appareil et contactez votre distributeur ou un technicien spécialisé.
- Placez le cordon d'alimentation correctement afin qu'il ne puisse pas s'emmêler et branchez-le dans une prise connectée à la terre.
- Tous les jours, après la fin de la journée, débranchez l'appareil et le cordon d'alimentation du secteur.
- Si vous détectez une anomalie dans le fonctionnement du produit, consultez votre distributeur ou un technicien spécialisé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'appareil et les accessoires doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Connectez l'appareil uniquement à une prise de courant correctement installée. La tension du réseau local doit correspondre aux données techniques de l'appareil.
- La prise de courant doit être accessible au cas où vous devriez débrancher l'appareil rapidement et à tout moment.
- Tirez toujours sur la fiche et non sur le câble.
- Ne manipulez aucun composant électrique, n'ouvrez ou réparez aucun composant de l'appareil.
- Seul votre distributeur ou un technicien spécialisé doit réparer l'appareil.
- Ne démarrez pas l'appareil si celui-ci ou le câble réseau sont endommagés.
- Ne touchez jamais l'appareil ou le câble réseau avec des mains mouillées.

CONTENU DE LA BOÎTE


- Corps principal x 1 unité
- Câble d'alimentation x 1 unité
- Pièce à main avec sonde à « double stick » x 1 unité
- Pièce à main avec sonde à rouleau x 1 unité
- Manuel d'instruction x 1 unité

PRÉCAUTIONS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Produit	Courant galvanique
Référence	H2401
Tension	85-265 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Puissance	20 W
Dimensions	28 x 17 x 11 cm
Poids net	1,95 Kg

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

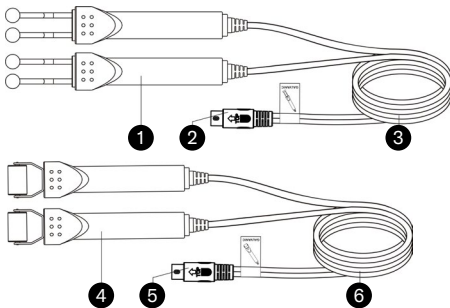


- ❶ Pièce à main avec sonde à « double stick »
 - ❷ Connecteur de câble pièce à main de la sonde « double stick »
 - ❸ Câble flexible de la sonde « double stick »
 - ❹ Pièce à main avec sonde à rouleau
 - ❺ Connecteur de câble pièce à main de la sonde à rouleau
 - ❻ Câble flexible de la sonde à rouleau
- Sonde « double stick » : pour traiter des zones cutanées petites ou irrégulières
 - Sonde à rouleau : pour traiter les zones de peau larges et régulières

PANNEAU DE CONTRÔLE

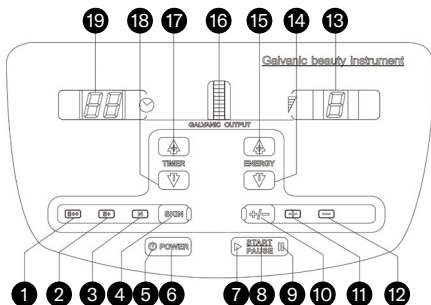

- ❶ Indicateur de peau très sensible.
- ❷ Indicateur de peau sensible
- ❸ Indicateur de peau normale
- ❹ Sélection du type de peau
- ❺ Indicateur allumé
- ❻ Bouton-poussoir marche/arrêt
- ❼ Indicateur de marche
- ❽ Bouton marche / arrêt
- ❾ Indicateur de pause
- ❿ Bouton de sélection de la conduction ionique
- ⓫ Indicateur de conduction de cations (charge positive)
- ⓫ Indicateur de conduction des anions (charge négative)
- ⓫ Affichage de puissance
- ⓫ Bouton-poussoir pour diminuer la puissance
- ⓫ Bouton poussoir pour augmenter la puissance
- ⓫ Indicateur de conduction de courant galvanique
- ⓫ Bouton-poussoir d'augmentation du temps
- ⓫ Bouton-poussoir de diminution du temps
- ⓫ Minuterie


FACE ARRIÈRE

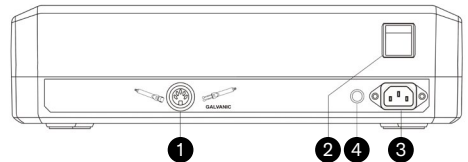

- ❶ Connexion du câble pièce à main de la sonde
- ❷ Interrupteur d'alimentation électrique
- ❸ Connecteur d'alimentation électrique
- ❹ Fusible

INSTRUCTIONS DE CONNEXION

- Branchez le cordon d'alimentation électrique sur le panneau arrière du corps principal.
- Connectez le câble de la pièce à main haute fréquence à la sortie correspondante sur le panneau arrière.
- Il est uniquement possible de connecter un des 2 pièces à main en même temps, vous devez donc sélectionner celui dont vous avez besoin en fonction du traitement à effectuer.

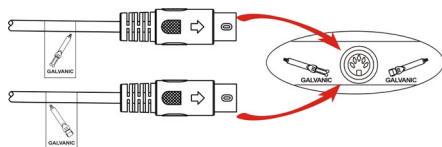

ALLUMAGE ET CONFIGURATION

- Activez l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil et appuyez sur **[POWER]** sur le panneau de commande. Le voyant d'alimentation s'allume. La machine sera en mode veille et prête à fonctionner. Panneau de commande principal :
 - La minuterie indiquera 15 minutes.
 - La puissance indiquée montrera 1.
 - L'indicateur de peau normale **[N]** s'allumera.
 - L'indicateur de conduction de cations (charge positive) **[+]** s'allumera.
 - Sur le bouton-poussoir **[START PAUSE]**, l'indicateur de pause s'allume.
- Réglez la minuterie à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]** pour régler la durée de fonctionnement de la machine, dans une plage comprise entre 1 et 30 min.
- Réglez la puissance à l'aide des touches **[▲]** ou **[▼]** pour définir la puissance de la machine, dans une plage de puissances comprise entre 1 et 9.
- Sélection du type de peau : utilisez le bouton **[SKIN]** pour sélectionner le type de peau à traiter.
 - Lorsque l'indicateur **[N]** s'allume, le type de peau sélectionné est «normal».
 - Lorsque le voyant **[S+]** est allumé, le type de peau sélectionné est «sensible».
 - Lorsque l'indicateur **[S++]** est allumé, le type de peau sélectionné est «très sensible».
- Sélection de la conduction d'ions : appuyez sur **[+/-]** pour sélectionner la polarisation de la sonde avec le câble rouge. La sonde avec le câble noir aura toujours la polarité inverse de celle choisie pour le câble rouge
 - Une caractéristique de ce dispositif est que le patient ne doit pas tenir d'électrode pour fermer le circuit, car l'une des sondes agit en tant que positif et l'autre sonde en tant que négatif,

fermant ainsi le circuit.

- Lorsque le voyant **[+]** est allumé, il indique la conduction de cations (charge positive).
- Lorsque le témoin **[+/-]** s'allume, il indique la conduction de anions (charge négative).
- Utilisez le bouton **[START PAUSE]** pour démarrer ou arrêter le fonctionnement de l'appareil.
 - En cours de fonctionnement, l'indicateur s'allume.
 - En pause ou en attente, le voyant s'allume.

FONCTIONNEMENT

Ce dispositif peut être utilisé avec la pièce à main avec sonde à rouleau pour les grandes zones ou les zones régulières de la peau ou avec la pièce à main avec sondes à double «stick» pour les petites zones ou les zones irrégulières de la peau.

- Connectez l'appareil et laissez-le en mode veille avec l'indicateur .
- Appliquez un gel ou une crème conductrice après avoir nettoyé la peau à traiter.
- Sélectionnez le type d'onde à utiliser, la durée de fonctionnement et réglez la puissance au minimum.
- Pour sélectionner correctement la polarisation de la conduction ionique avec le bouton-poussoir **[+/-]**, il faut prendre en compte la valeur du pH du produit précédemment appliqué, en sélectionnant l'une ou l'autre polarité selon qu'il s'agit d'un produit basique ou acide.
- Appuyez sur **[START PAUSE]** et le témoin de fonctionnement s'allume.
- Prenez les 2 sondes (ou rouleau ou « double stick ») sans qu'elles se touchent entre elles.
- Commencez à vous déplacer lentement et réglez la puissance jusqu'à atteindre progressivement le niveau nécessaire au traitement, en maintenant toujours une légère sensation de brûlure.
- Lors de l'application de ce traitement sur le visage, il est conseillé d'alterner les 2 sondes (positive et négative) d'un côté et de l'autre du visage, afin d'égaliser les effets des deux côtés.

À prendre en compte :

- Lorsque la polarité est réglée pour les électrodes positives, la sonde à rouleau ressentira une sensation de brûlure plus vive que pour l'électrode négative. Sélectionnez-la en fonction de vos besoins.
- Le choix de la conduction ionique à utiliser doit être conforme au pH du produit appliqué.
 - Lorsque la sonde à fil rouge agit comme une charge positive, la solution conductrice doit être acide (+).
 - Lorsque la sonde avec le câble rouge agit comme une charge négative, la solution conductrice doit être basique (-).

- Si le pH n'est pas indiqué dans la solution à utiliser, utilisez un papier indicateur de pH pour le déterminer.
- Si le voyant de fonctionnement ► clignote, cela signifie que le circuit n'est pas fermé et qu'il n'y a pas de conduction ionique.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le du secteur.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de liquides pour le nettoyer.
- Après chaque utilisation, les différents composants et accessoires doivent être stérilisés et séchés.
- Pour tout entretien ou réparation du produit, contactez votre distributeur ou un technicien spécialisé.

RECYCLAGE

Si vous avez besoin d'éliminer le produit ou l'une de ses pièces ou accessoires, consultez et respectez les lois et règlements applicables à la gestion des déchets et à la protection de l'environnement.

DDUUEETT EUROPE SL vi ringrazia per la fiducia riposta nell'acquisto dei prodotti Sonia. Ci auguriamo che questo manuale di istruzioni vi aiuti a trarre il massimo beneficio da questo prodotto.

Se avete dubbi sul suo utilizzo o sul suo funzionamento, siete pregati di contattare il vostro rivenditore.

INTRODUZIONE

- Siete pregati di leggere attentamente il manuale di istruzioni nella sua interezza prima di procedere all'utilizzo del prodotto. Tenete conto delle avvertenze presenti in questo manuale.
- Conservate sempre questo manuale di istruzioni e, qualora il dispositivo venisse trasferito altrove, consegnate congiuntamente il manuale poiché rappresenta una parte essenziale del prodotto.
- Alcuni componenti del prodotto possono differire dall'immagine che compare nei cataloghi, nel sito web, nelle brochure commerciali, ecc.
- Al fine di apportare migliorie al prodotto, il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o la componentistica del medesimo senza preavviso.

CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato da professionisti della bellezza nell'ambito di centri estetici e non deve essere utilizzato per altre finalità.
- Siete pregati di tener presente che qualsiasi improprio utilizzo del dispositivo comporta la perdita della garanzia.
- Non apportate alcuna modifica al dispositivo senza la previa autorizzazione di DDUUEETT EUROPE SL.
- DDUUEETT EUROPE SL non sarà responsabile di alcun danno a persone o cose occasionato da un improprio utilizzo del prodotto.

CONTROINDICAZIONI

- Questo prodotto non deve essere usato su:
 - Persone che recano nel corpo protesi metalliche
 - Persone portatrici di pacemaker o con problemi di natura cardiaca.
 - Donne in stato di gravidanza.
 - Persone con pelle sensibile, lesioni, infiammazioni o qualsiasi problema o patologia di natura dermatologica.
- In caso di persone sottoposte a trattamento medico o a percorso diagnostico è necessario utilizzare il prodotto sotto autorizzazione medica.

MISURE PRECAUZIONALI

- Prima del primo utilizzo e dopo ciascun utilizzo, occorre verificare che il dispositivo e il cavo elettrico non siano danneggiati.
- Occorre scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di iniziare le operazioni di pulizia o qualsiasi tipo di manutenzione.
- Non utilizzate il prodotto all'aperto o in qualsiasi luogo in cui possa trovarsi soggetto a umidità o intemperie.
- Se il cavo di alimentazione dovesse presentare un qualsiasi tipo di difetto, scollegate immediatamente il dispositivo e informate immediatamente il rivenditore o un tecnico specializzato.
- Posizionate il cavo di alimentazione in modo corretto per evitare che si possa inciampare e collegatelo a una presa con messa a terra.
- Ogni giorno, a fine giornata, scollegate il dispositivo e scollegate il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
- Se dovete rilevare delle anomalie nel funzionamento del prodotto, consultate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il dispositivo e gli accessori devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- Collegate il dispositivo solo a una presa di corrente correttamente installata. La tensione di rete locale deve corrispondere ai dati tecnici del dispositivo.
- La presa di corrente deve essere accessibile nel caso in cui sia necessario scollegare rapidamente l'apparecchio in un dato momento.
- Scollegate sempre tirando la spina e non il cavo elettrico.
- Non maneggiate mai nessun componente elettrico e non aprite né cercate di riparare alcun componente dell'apparecchio.
- Il dispositivo deve essere riparato unicamente dal vostro rivenditore o da un tecnico specializzato.
- Non avviate il dispositivo se quest'ultimo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.
- Non toccate mai il dispositivo o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale x 1 unità
- Cavo di alimentazione x 1 unità
- Manipolo con sonda a doppio bastone x 1 unità
- Manipolo con sonda a rullo x 1 unità
- Manuale di istruzioni x 1 unità

CARATTERISTICHE TECNICHE


Producto	Corrente galvanica
Prodotto	H2401
Tensione elettrica	85-265 V
Frequenza d'ingresso	50/60 Hz
Potenza	20 W
Dimensioni	28 x 17 x 11 cm
Peso netto	1,95 Kg

IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

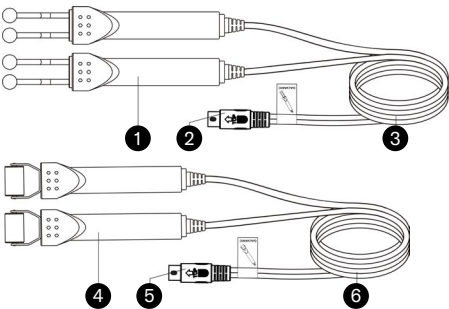


- 1 Manipolo con sonda a doppio bastone
- 2 Connettore del cavo del manipolo della sonda a “doppio stick”
- 3 Cavo flessibile della sonda a “doppio stick”
- 4 Manipolo con sonda a rullo
- 5 Connettore del cavo del manipolo della sonda a rullo
- 6 Cavo flessibile della sonda a rullo
 - Sonda a “doppio stick”: per trattare aree di epidermide piccole o irregolari
 - Sonda a rullo: per trattare aree di epidermide ampie e regolari

PANNELLO DI CONTROLLO

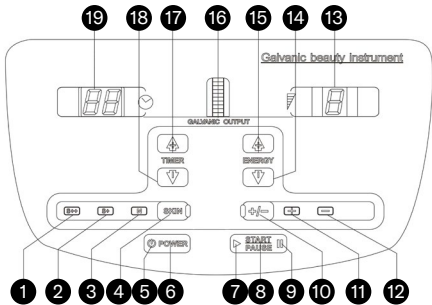

- 1 Spia per pelli molto sensibili
- 2 Spia per pelli sensibili
- 3 Spia per pelli normali
- 4 Selezione della tipologia di pelle
- 5 Spia accesa
- 6 Pulsante di accensione/spengimento
- 7 Spia di funzionamento
- 8 Pulsante Start/Stop
- 9 Spia indicante la pausa
- 10 Pulsante di selezione della conduzione ionica
- 11 Spia della conduzione cationica (carica positiva)
- 12 Spia della conduzione anionica (carica negativa)
- 13 Display di potenza
- 14 Pulsante per diminuire la potenza
- 15 Pulsante per aumentare la potenza
- 16 Spia di conduzione della corrente galvanica
- 17 Pulsante per aumentare il tempo
- 18 Pulsante per ridurre il tempo
- 19 Timer


PANNELLO POSTERIORE

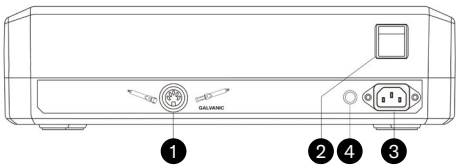

- 1 Collegamento del cavo del manipolo della sonda
- 2 Interruttore dell'alimentazione
- 3 Connettore dell'alimentazione
- 4 Fusibile

ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO

- Collegate il cavo di alimentazione al pannello posteriore del corpo principale.
- Collegate il cavo del manipolo alla corrispondente uscita posizionata sul pannello posteriore.
- È possibile collegare solo uno dei 2 manipoli contemporaneamente, pertanto è necessario selezionare quello adatto rispetto al trattamento da eseguire.

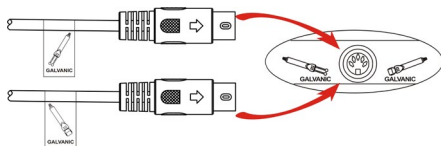

ACCENSIONE E CONFIGURAZIONE

- Attivate l'interruttore di alimentazione che si trova sulla parte posteriore della macchina e premete **POWER** sul pannello di controllo. La spia di alimentazione si accenderà. La macchina si troverà in modalità standby e sarà pronta per il funzionamento. Sul pannello di controllo:
 - Il timer visualizzerà 15 minuti.
 - La spia di potenza visualizzerà 1.
 - La spia per pelli normali **N** si accenderà.
 - La spia di conduzione cationica (carica positiva) **+** si accenderà.
 - Sul pulsante **START PAUSE**, la spia indicante la pausa **II** si accenderà.
- Impostate il timer utilizzando i pulsanti **▲** o **▼** per impostare il tempo di funzionamento del dispositivo, in un intervallo compreso tra 1 e 30 min.
- Regolate la potenza utilizzando i pulsanti **▲** o **▼** per impostare la potenza della macchina, in un intervallo di potenza compreso tra 1 e 9.
- Selezione del tipo di pelle: utilizzate il pulsante **SKIN** per selezionare il tipo di pelle da trattare.
 - Quando la spia **N** si accende, il tipo di pelle selezionata è quella "normale".
 - Quando la spia **S+** si accende, il tipo di pelle selezionata è quella "sensibile".
 - Quando la spia **S++** si accende, il tipo di pelle selezionata è quella "molto sensibile".
- Selezione della conduzione ionica: premete **+/-** per selezionare la polarizzazione della sonda con cavo rosso. La sonda con cavo nero avrà sempre la polarità inversa a quella selezionata per il cavo rosso
 - Una caratteristica di questo dispositivo è che il paziente non deve reggere alcun elettrodo per chiudere il circuito, dal momento che una delle sonde agisce da positiva e l'altra sonda agisce da negativa, chiudendo così il cerchio.

- Quando la spia **+** si accende, indica la conduzione cationica (carica positiva).
- Quando la spia **-** si accende, indica la conduzione anionica (carica negativa).
- Utilizzate il pulsante **START PAUSE** per avviare o stoppare il funzionamento del dispositivo.
 - Quando è in funzione, la spia **▶** si accenderà.
 - Quando è in pausa o in attesa, si accenderà la spia **II**.

FUNZIONAMENTO

Questo dispositivo può essere utilizzato con i manipoli con la sonda a rullo, per aree ampie o regolari dell'epidermide, o con i manipoli con sonda a doppio "stick" per aree piccole o irregolari dell'epidermide.

- Collegate il dispositivo e lasciatelo in modalità standby con la spia **II**.
- Applicare il gel conduttivo o la crema dopo aver pulito la pelle da trattare.
- Selezionate il tipo di pelle da trattare, il tempo di funzionamento e regolate la potenza al minimo.
- Per selezionare correttamente la polarizzazione della conduzione ionica con il pulsante **+/-**, è necessario tenere conto del valore del pH del prodotto precedentemente applicato, selezionando l'una o l'altra polarità a seconda che si tratti di un prodotto basico o acido.
- Premete **START PAUSE** e la spia di funzionamento **▶** si accenderà.
- Prendete le 2 sonde (o quelle a rullo o quelle a doppio "stick") senza che si tocchino tra loro.
- Iniziate a muoverle lentamente e regolate la potenza fino a raggiungere il livello necessario per un trattamento di tipo graduale, mantenendo sempre una leggera sensazione di pizzicore.
- Quando questo trattamento viene applicato al viso è consigliabile alternare le 2 sonde (quella positiva e quella negativa) su un lato e sull'altro del viso, per uniformare gli effetti su ambo i lati.

Si prega di tener presente quanto segue:

- Quando la polarità è impostata per elettrodi positivi, ci sarà una sensazione di pizzicore determinata dalla sonda a rullo più intensa rispetto a quella determinata dall'elettrodo negativo. Selezionatelo in base alle vostre esigenze.
- La selezione della conduzione ionica da utilizzare deve essere rispettare il pH del prodotto applicato.
 - Quando la sonda con il cavo rosso funge da carica positiva, la soluzione conduttiva deve essere acida (+).
 - Quando la sonda con cavo rosso funge da carica negativa, la soluzione conduttiva deve essere basica (-).
 - Se il pH non è indicato nella soluzione da

utilizzare, utilizzare una cartina tornasole per il pH, per stabilirlo.

- Se la spia di funzionamento ► lampeggia, significa che il circuito non è chiuso e non c'è conduzione ionica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, scollegatelo dalla rete elettrica.
- Pulite il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzate liquidi per pulirlo.
- Dopo ciascun utilizzo, i diversi componenti e i diversi accessori devono essere sterilizzati e asciugati.
- Per la manutenzione o la riparazione di una qualsiasi parte del prodotto, è necessario che contattiate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

SMALTIMENTO

Se dovesse rendersi necessario smaltire il prodotto o una qualsiasi delle sue parti o dei suoi accessori, siete pregati di consultare e rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla gestione dei rifiuti e alla protezione ambientale.

Wir von DDUUEETT EUROPE S. L. danken Ihnen für Ihr Vertrauen beim Kauf von Sonia-Produkten. Wir hoffen, dass diese Bedienungsanleitung Ihnen hilft, dieses Produkt optimal zu nutzen.

Sollten Sie noch Fragen zur Verwendung und/oder Funktion haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

VOR ALLEM

- Lesen Sie sich bitte die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Beachten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Warnhinweise.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung stets auf und händigen Sie bei der Weitergabe des Geräts die Bedienungsanleitung aus, da diese ein wesentlicher Bestandteil des Produkts ist.
- Einige Komponenten des Produktes können von den Abbildungen in Katalogen, im Web, in Unternehmensbroschüren usw. abweichen.
- Um Verbesserungen am Produkt vorzunehmen, behält sich der Hersteller das Recht vor, dessen Merkmale und/oder Komponenten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

KORREKTE NUTZUNG DES GERÄTS

- Dieses Produkt wurde für die Verwendung durch Fachleute auf dem kosmetischen Sektor in kosmetischen Kliniken entwickelt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass jeder unsachgemäße Gebrauch des Geräts zum Verlust der Garantie führt.
- Nehmen Sie ohne Genehmigung von DDUUEETT EUROPE S. L. keine Änderungen am Gerät vor.
- DDUUEETT EUROPE S. L. haftet nicht für materielle oder persönliche Schäden, die auf den Missbrauch des Produkts zurückzuführen sind.

GEGENANZEIGEN

- Dieses Produkt darf nicht verwendet werden bei:
 - Personen mit Metallimplantaten im Körper.
 - Menschen mit Herzschrittmacher oder Herzproblemen.
 - Schwangeren Frauen.
 - Menschen mit empfindlicher Haut, Läsionen, Entzündungen oder Hautproblemen oder -erkrankungen.
- Bei Personen, die sich in ärztlicher Behandlung oder in einem diagnostischen Verfahren befinden, muss das Produkt nach ärztlicher Genehmigung verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch das Gerät und das Netzkabel auf Beschädigungen.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder an Orten, an denen es durch Feuchtigkeit oder schlechtes Wetter beeinträchtigt werden kann.
- Wenn das Stromversorgungskabel defekt ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker und informieren Sie Ihren Händler oder einen spezialisierten Techniker.
- Positionieren Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und schließen Sie es an eine geerdete Steckdose an.
- Trennen Sie das Gerät täglich am Ende des Arbeitstages vom Netz und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Wenn Sie eine Störung beim Betrieb des Produkts feststellen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen spezialisierten Techniker.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät und das Zubehör müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an. Die lokale Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Die Steckdose muss zugänglich sein, wenn Sie das Gerät zu einem bestimmten Zeitpunkt schnell vom Netz trennen müssen.
- Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Netzkabel.
- Berühren Sie niemals elektrische Komponenten oder öffnen oder reparieren Sie keine Komponenten des Gerätes.
- Das Gerät darf nur von Ihrem Händler oder einem spezialisierten Techniker repariert werden.
- Starten Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät selbst oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweisen.
- Berühren Sie das Gerät oder das Netzkabel auf keinen Fall mit nassen Händen.


INHALT DER VRPACKUNG

- Hauptgerät x 1 St.
- Stromkabel x 1 St.
- Handstück mit Doppelsonde „Stick“ x 1 St
- Handstück mit Rollensonde x 1 St
- Bedienungsanleitung x 1 St.

TECHNISCHE MERKMALE


Produkt	Galvanischer Strom
Referenz	H2401
Spannung	85-265 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Leistung	20 W
Abmessungen	28 x 17 x 11 cm
Nettogewicht	1,95 Kg

KENNZEICHNUNG DER KOMPONENTEN

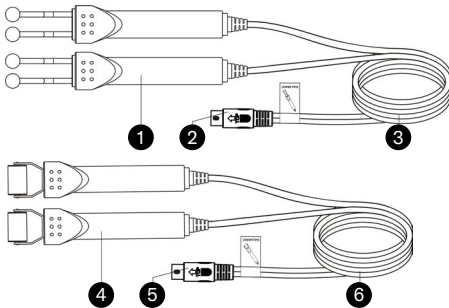


- 1 Handstück mit Doppelsonde „Stick“
- 2 Anschlusskabel-Stecker des Handstücks für die Sonde „Doppel-Stick“
- 3 „Doppel-Stick“-Sonde mit flexiblen Kabel
- 4 Handstück mit Rollensonde
- 5 Kabelstecker, Handstück der Rollensonde
- 6 Flexibles Kabel für die Rollensonde
 - „Doppel-Stick“-Sonde: Zur Behandlung kleiner oder ungleichmäßiger Hautbereiche
 - Rollensonde: Zur Behandlung großer und gleichmäßiger Hautbereiche

BEDIENFELD

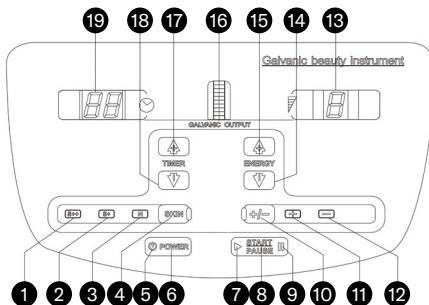

- 1 Anzeige für sehr empfindliche Haut.
- 2 Anzeige für empfindliche Haut
- 3 Anzeige für normale Haut
- 4 Auswahl des Hauttyps
- 5 Anzeige ein
- 6 Taste ein/aus
- 7 Ganganzeige
- 8 Taste Start/Stop
- 9 Anzeige Pause
- 10 Taste zur Auswahl der Ionenleitung
- 11 Anzeige Kationenleitung (positive Ladung)
- 12 Anzeige Anionenleitung (negative Ladung)
- 13 Leistungsanzeige
- 14 Taste für die Leistungsverringerung
- 15 Taste für die Leistungserhöhung
- 16 Anzeige für die Leitung galvanischen Stroms
- 17 Taste für die Zeitverlängerung
- 18 Taste für die Zeitverkürzung
- 19 Timer


RÜCKWAND

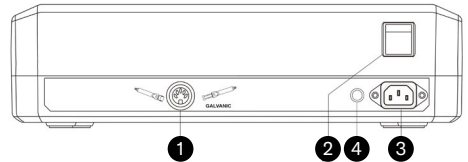

- 1 Anschlusskabel für das Sonden-Handstück
- 2 Netzschalter
- 3 Netzteilanschluss
- 4 Sicherung

HINWEISE ZUM ANSCHLUSS

- Stecken Sie das Netzkabel in die Rückwand des Hauptgerätes ein.
- Verbinden Sie das Kabel des Hochfrequenz-Handstücks mit dem entsprechenden Ausgang an der Rückwand.
- Es kann nur eines der 2 Handstücke gleichzeitig angeschlossen werden, daher müssen Sie das Handstück entsprechend der gewünschten, durchzuführenden Behandlung auswählen.

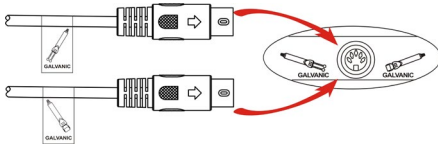

EINSCHALTEN UND KONFIGURATION

- Aktivieren Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts und drücken Sie **POWER** auf dem Bedienfeld. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus und ist betriebsbereit. Das Bedienfeld:
 - Der Timer zeigt 15 Minuten an.
 - Die Leistungsanzeige zeigt 1 an.
 - Die Anzeige für normale Haut **N** leuchtet auf.
 - Die Anzeige der Kationenleitung (positive Ladung) **+** leuchtet auf.
 - Auf der Taste **START/PAUSE** leuchtet die Pausenanzeige auf.
- Stellen Sie den Timer mit den Tasten oder ein, um die Betriebszeit des Gerätes für einen Bereich zwischen 1 und 30 Minuten einzustellen.
- Stellen Sie die Leistung mit den Tasten oder ein, um die Leistung des Gerätes mit einem Leistungsbereich zwischen 1 und 9 festzulegen.
- Auswahl des Hauttyps: Wählen Sie mit der Taste **SKIN** den zu behandelnden Hauttyp.
 - Wenn die Anzeige **N** aufleuchtet, ist der gewählte Hauttyp „normal“.
 - Wenn die Anzeige **S+** leuchtet, ist der ausgewählte Hauttyp „empfindlich“.
 - Wenn die Anzeige **S++** leuchtet, ist der ausgewählte Hauttyp „sehr empfindlich“.
- Auswahl der Ionenleitung: Drücken Sie **+/-**, um die Polarisation der Sonde mit rotem Draht auszuwählen. Bei der Sonde mit schwarzem Draht ist die Polarität immer umgekehrt zur für den roten Draht ausgewählten
 - Dieses Merkmal zeichnet sich dadurch aus, dass der Patient zum Schließen des Stromkreises keine Elektrode halten muss, da eine der Sonden positiv und die andere Sonde negativ ist und diese somit den Kreis schließen.
 - Wenn die Anzeige **+** aufleuchtet, zeigt dies die Kationenleitung (positive Ladung) an.
 - Wenn die Anzeige **-** aufleuchtet, zeigt dies die Anionenleitung (negative Ladung) an.
- Mit der Taste **START/PAUSE** kann der Betrieb des Geräts gestartet oder gestoppt werden.
 - Während des Betriebs leuchtet die Anzeige auf.
 - In der Pause oder im Standby leuchtet die Anzeige auf.

BETRIEB

Dieses Gerät kann mit der Rollensonde für große oder gleichmäßige Hautbereiche oder mit den Handstücken mit „Doppel-Stick“-Sonde für kleine oder unregelmäßige Hautbereiche verwendet werden.

- Schließen Sie das Gerät an und lassen Sie es mit der Anzeige im Standby-Modus.
- Tragen Sie nach der Reinigung der zu behandelnden Haut ein leitfähiges Gel oder eine Creme auf.
- Wählen Sie den zu behandelnden Hauttyp und die Betriebsdauer aus und stellen Sie die Leistung auf ein Minimum ein.
- Um die Polarisation der Ionenleitung mit der Drucktaste **+/-** richtig zu wählen, muss der pH-Wert des zuvor aufgetragenen Produkts berücksichtigt werden, wobei die eine oder die andere Polarität ausgewählt werden muss, je nachdem, ob es sich um ein Basen- oder Säureprodukt handelt.
- Drücken Sie **START/PAUSE** und die Betriebsanzeige leuchtet auf.
- Nehmen Sie die 2 Sonden (oder die Rollen oder „Doppel-Stick“-Sonde) auf, ohne dass sie sich untereinander berühren.
- Beginnen Sie, sie langsam zu bewegen, und stellen Sie die Leistung so ein, dass sie schrittweise das für die Behandlung erforderliche Niveau erreichen, wobei Sie stets ein leichtes Stechen wahrnehmen.
- Bei der Anwendung dieser Behandlung im Gesicht ist es ratsam, die beiden Sonden (positive und negative) abwechselnd auf der einen und anderen Gesichtseite anzuwenden, um die Wirkung auf beide Seiten auszugleichen.

Bitte beachten

- Wenn die Polarität für positive Elektroden eingestellt ist, wird ein stärker stechendes Gefühl von der Rollensonde wahrgenommen, als bei der negativen Elektrode. Wählen Sie sie nach Ihren Bedürfnissen aus.
- Die Auswahl der zu verwendenden Ionenleitung sollte dem pH-Wert des verwendeten Produkts entsprechen.
 - Wenn die Sonde mit rotem Draht als positive Ladung wirkt, muss die leitfähige Lösung sauer sein (+).
 - Wenn die Sonde mit dem roten Kabel als negative Ladung wirkt, muss die leitfähige Lösung basisch (-) sein.
 - Wenn der pH-Wert in der zu verwendenden Lösung nicht angegeben ist, verwenden Sie zur Bestimmung ein pH-Indikatorpapier.
- Wenn die Betriebsanzeige blinkt, bedeutet dies, dass der Stromkreis nicht geschlossen ist und keine Ionenleitung vorliegt.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor Reinigung des Gerätes ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine Flüssigkeiten.
- Nach jedem Gebrauch müssen die verschiedenen Komponenten und Zubehörteile sterilisiert und getrocknet werden.
- Wenden Sie sich zur Wartung oder Reparatur eines Teils des Produkts an Ihren Händler oder einen spezialisierten Techniker.

RECYCLING

Wenn Sie das Produkt, Teile oder Zubehör entsorgen müssen, halten Sie sich bitte an die für die Abfallentsorgung und den Umweltschutz geltenden Gesetze und Vorschriften.

